




HyBase 8300/8500

Операционный стол



mindray
healthcare within reach

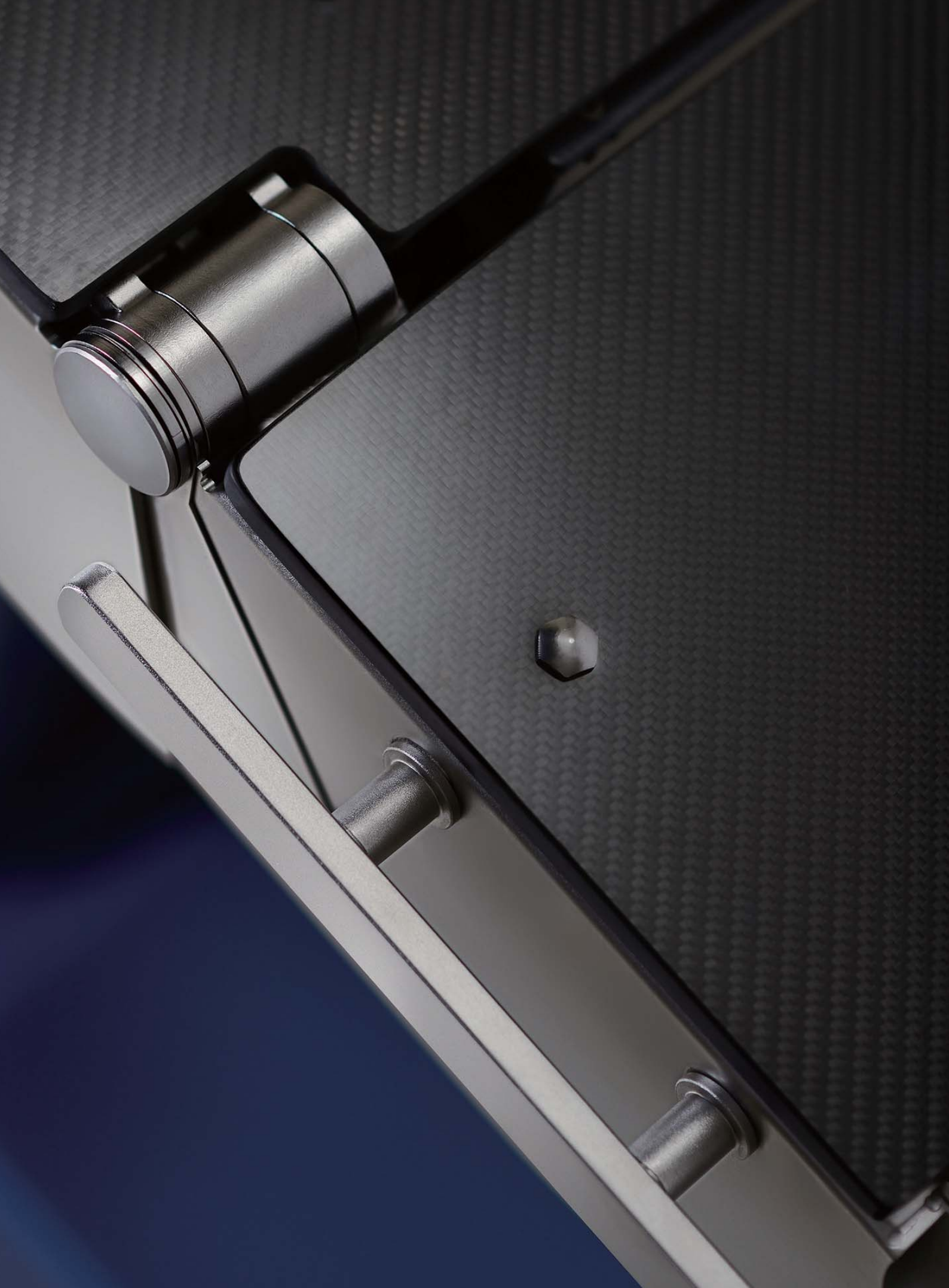



HyBase 8300/8500

Электрогидравлический операционный стол

Разработанный специально для проведения наиболее сложных хирургических вмешательств, операционный стол HyBase 8300\8500 выдерживает нагрузку до 460 кг, обеспечивая высокий уровень безопасности и стабильности в любом положении. С функцией продольного сдвига столешницы на 480 мм модель HyBase 8300\8500 идеально подходит для кардиохирургических вмешательств с использованием С-дуги. Модульный дизайн столешницы позволяет привести стол в положения для проведения различных хирургических вмешательств.

- Продольный сдвиг столешницы 480 мм для свободного доступа С-дуги
- Грузоподъемность 460 кг для непревзойденной стабильности и безопасности использования
- Модульный дизайн столешниц
- Функция предотвращения столкновений и повреждений секций стола
- Многослойный водонепроницаемый противопролежневый матрас выполнен с использованием ультразвуковой склейки швов
- Нижнее положение столешницы 575 мм от пола для проведения нейрохирургических вмешательств
- Беспроводной пульт управления

HyBase 8300/8500

Электрогидравлический операционный стол



01

Цветной LCD дисплей с диагональю 2,4 дюйма

На дисплее отображена вся необходимая информация, такая как индикация положения, активация тормозной системы, индикатор заряда батареи.

Эргономичный дизайн

- Мягкий материал покрытия пульта управления для комфорта при использовании
- Функция «Автоматическое отключение» деактивируется при нажатии любой кнопки
- Подсветка обеспечивает комфортное использование при выключенном свете
- Регулировки положений Сгибание (Flex), Разгибание (Reflex), шезлонг, и 0-позиция путем нажатия одной кнопки

02

03

10 индивидуальных положений

В настройки операционного стола можно записать 10 индивидуальных положений для различных типов хирургических вмешательств, что значительно сокращает время подготовки к операции

Интуитивно понятный дизайн

Кнопки управления на пульте расположены в соответствии с положением пациента, отображенного на пульте в виде диаграммы. Это позволяет пользователю быстро найти необходимую кнопку при проведении регулировок стола

04

05

Инфракрасный беспроводной пульт управления

С помощью беспроводного ИК пульта пользователь может осуществлять регулировки положений стола из любого места в операционной

Функция беспроводной зарядки

Отсутствие порта подключения зарядного устройства на пульте управления обеспечивает возможность его очистки и дезинфекции для соответствия необходимому уровню чистоты в операционной

06

HyBase 8300/8500

Электрогидравлический операционный стол



Стабильность фиксации за счет автоматического подъема/опускания четырех роликовых колес

Сверхвысокая грузоподъемность

Операционный стол HyBase 8300\8500 способен обеспечить наивысший уровень безопасности и стабильности. За счет максимальной грузоподъемности 460 кг операционный стол подходит для проведения хирургических вмешательств в любом положении вне зависимости от веса пациента и идеально подходит для бариатрической хирургии.

Функция предотвращения столкновений

В месте присоединения ножных секций расположены датчики системы предотвращения столкновений, которые распознают присоединяемые секции и автоматически получают информацию из операционной системы для предотвращения возможного столкновения различных секций стола при проведении регулировок положений. Автоматизированная система отслеживает положения тазовой секции, ножных секций и других секций стола при движении для того, чтобы предотвратить возможные столкновения с другими частями операционного стола и повреждения секций.



Максимальный сдвиг столешницы

С функцией продольного сдвига столешницы до 480мм, NuBase 8300\8500 предоставляет максимально большую область для доступа С-дуги без необходимости менять положение пациента. Это делает стол идеально подходящим для проведения кардиохирургических вмешательств. А опция исполнения столешниц из карбона обеспечивает исключительную четкость визуализации.



Двухслойный матрас

Благодаря противопрлежневому висколастичному матрасу из двухслойного вспененного материала, операционный стол NuBase 8300\8500 обеспечивает максимальную безопасность пациента. Оптимальное распределение давления на ткани пациента в значительной степени устраняет нарушения микроциркуляции в тканях - основную причину образования пролежней, и сокращает вероятность послеоперационных осложнений, ускоряя выздоровление пациентов. Матрас водонепроницаем и легко чистится за счет ультразвуковой склейки швов и креплений из материала GORE-TEX.



Низкое положение столешницы

Минимальное положение столешницы составляет 575 мм, что обеспечивает максимальный комфорт хирурга при проведении вмешательств сидя, например, для нейрохирургии.




HyBase 8300/8500

Электрогидравлический операционный стол

Модульный дизайн столешниц

Модульный дизайн обеспечивает универсальность хирургического стола: нет необходимости приобретать специализированный стол, достаточно лишь наличия необходимого модуля для соответствующего типа операции. Система распознавания модулей определяет тип секции и автоматически получает информацию для предотвращения столкновений.



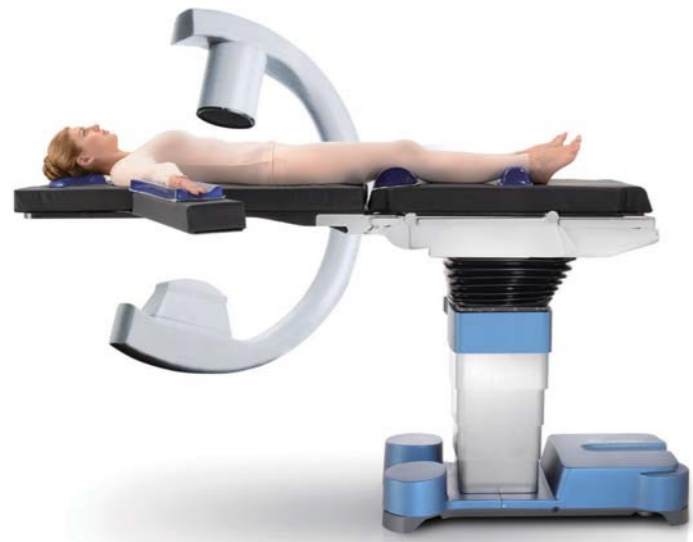

HyBase 8300/8500

Электрогидравлический операционный стол

Положения для разных хирургических вмешательств

Общая хирургия



Операции в области шеи и на щитовидной железе



Гинекология и урология



Реверс позиция, продольный сдвиг в сторону головной секции

ЛОР хирургия



Минимальное положение для ЛОР хирургии



Реверс позиция, удлинительная секция

Торакальная хирургия и операции на почках



Положение на боку, головная секция с двойной артикуляцией



Реверс позиция, эргономичные гидравлические опоры для ног

Эндоскопическая хирургия




Ножные секции с двойной артикуляцией

HyBase 8300/8500


Электрогидравлический операционный стол

Технические характеристики


Размеры	
Полная длина	2,090мм
Высота без матраса	HyBase 8300: 575-1075мм / HyBase 8500: 700-1200мм
Ширина без боковых рельсов	520мм
Ширина с боковыми рельсами	590мм

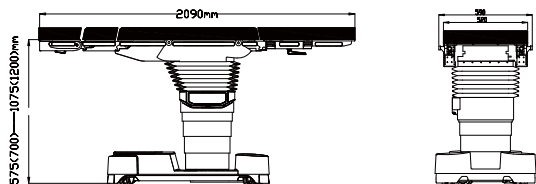


Положение Тренделенбурга	
Положение Тренделенбурга	HyBase 8300: Макс. 36° / HyBase 8500: Макс. 46°
Обратное положение Тренделенбурга	HyBase 8300: Макс. 36° / HyBase 8500: Макс. 46°

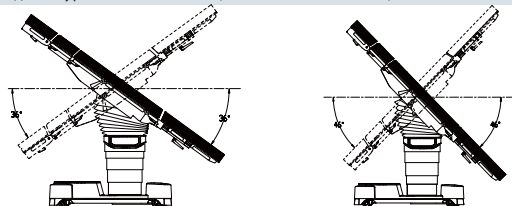


Ножные секции	
Угол подъема	Макс. 80°
Угол опускания (без сдвига)	Макс. 90°
Угол опускания (со сдвигом)	Макс. 100°

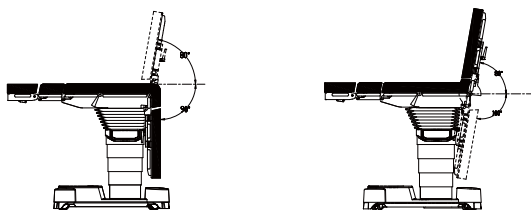


Положение разгибания (концы подняты)	110°
Положение разгибания (концы опущены)	30°
Положение Тренделенбурга	40°
Максимальная точка	

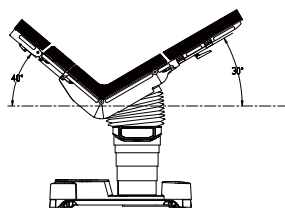


Продольный сдвиг (опция)	
Продольный сдвиг	Макс. 480мм

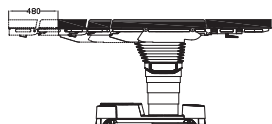


Боковой наклон	
Угол наклона влево	HyBase 8300: Макс. 26° / HyBase 8500: Макс. 36°
Угол наклона вправо	HyBase 8300: Макс. 26° / HyBase 8500: Макс. 36°

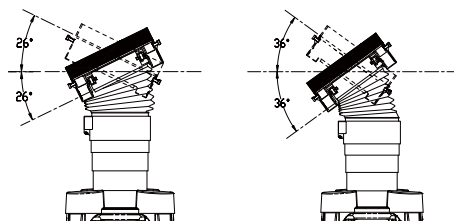


Спинная секция	
Подъем спинной секции	Макс. 90°
Опускание спинной секции	Макс. 45°

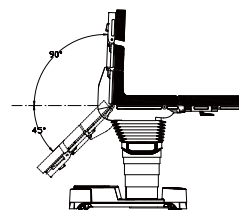


Головная секция	
Угол подъема	Головная секция: Макс. 45° / с двойной артикуляцией: Макс. 60°
Угол опускания	Головная секция: Макс. 90° / с двойной артикуляцией: Макс. 60°

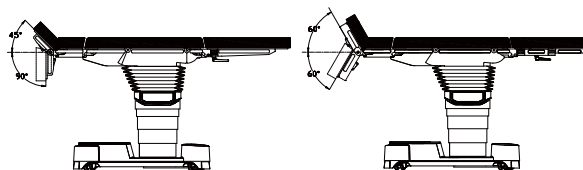

Положение сгибания (концы опущены)	220°
Положение сгибания (концы подняты)	20°
Обратное положение Тренделенбурга	20°
Минимальная точка	20°

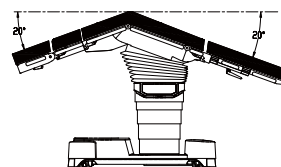

Положение «Шезлонг»	
Угол подъема спинной секции	80°
Положение Тренделенбурга	25°
Угол опуская ножных секций	70°

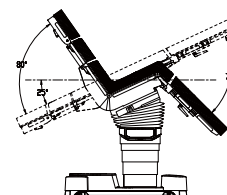



Материалы и информация в данной брошюре распространяется на международных рынках, но не все продукты доступны в стране вашего местонахождения. Пожалуйста, свяжитесь с представителем или партнерами для того, чтобы уточнить возможность поставки товаров или предоставления услуг.

Mindray Medical Netherlands B.V.

Drs.W.van Royenstraat 8, 3871 AN Hoevelaken, The Netherlands
Voice: (31-33) 254-4911
Fax: (31-33) 253-4280

Mindray Medical Italy S.r.l.

Via Leonardo DA Vinci, 158, 20090 Trezzano Sul Naviglio (MI), Italy
Voice: (39-02) 5737-401
Fax: (39-02) 5523-2018

Mindray Medical España S.L.

Avenida Manoteras 38, Edificio B, Bajo B008. 28050-Madrid Spain
Voice: (34-91) 392-3754
Fax: (34-91) 392-3756

Mindray Medical Germany GmbH

Zwischen den Bächen 4, 64625 Bensheim, Germany
Voice: (49) 6251-17524-0
Fax: (49) 6251-17524-20

Mindray (UK) Limited

Mindray House, Kingfisher Way, Hinchingbrooke Business Park, Huntingdon, Cambs, PE29 6FN
Voice: (44) 1480-416-840
Fax: (44) 1480-436-588

Mindray Medical France SARL

Europarc Creteil 1 allée des cerisiers 94000 CRETEIL, France
Voice: (33-1) 4513-9150
Fax: (33-1) 4513-9151

Mindray Medical Sweden AB

Rissneleden 136, 174 57 Sundbyberg, Sweden
Voice: (46) 8 555 54 121
Fax: (46) 8 555 54 101

Mindray Medical Rus Co.Ltd

Olimpiysky Prospekt 16, bld 5, 129110, Moscow, Russia
Voice: (7-499) 553-6036
Fax: (7-499) 553-6039

Mindray Medical Colombia S.A.S

Room No.702, Torre UNKA,Carrera 9 No.77-67, Bogota, Colombia
Voice: (57-1) 3130892 / 3210916

Mindray do Brasil – Comércio e Distribuição de Equipamentos Médicos Ltda.

Rua Tavares Bastos, 329, Perdizes, São Paulo – SP, CEP 05012-020
Voice: (55-11) 3124-8026
Fax: (55-11) 3078-8035

Mindray Medical Mexico S. de R.L. de C.V.

Félix Parra # 175 Colonia. San José Insurgentes Sur Delegación Benito Juárez 03900 México, D. F.
Voice: (52-55) 5661-9450 / (52-55) 5662-6620
Fax: (52-55) 5662-6597

PT.Mindray Medical Indonesia

The East 11th Floor, Unit 08 Jl. Dr. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E 3.2 No.1 Jakarta 12950
Voice: (6221) 2902-7280
Fax: (6221) 2902-7283

Mindray Medical Egypt

Ground Floor -11 El Imam Metwally El Sharawi Street, Sheraton Heliopolis - El Nozha, Cairo, Egypt
Voice: (2) 02 22691047
Fax: (2) 02 22691046

Mindray Medical Australia

ADD: 19 Harker St, Burwood VIC 3125, Australia
Voice: (61-3) 9830 6610
Fax: (61-2) 9550 2841

Mindray Medical Nigeria

ADD: 1004 Estate,Victoria Island, Lagos, Nigeria
Voice: (+234) 7030682053

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Delhi Office)

16th floor, Building No. 9-B, DLF Cyber City, DLF Phase-3, Gurgaon- 122002, Haryana
Voice: (91-124) 4632-488
Fax: (91-124) 4632499

Mindray Medical India Pvt. Ltd. (Mumbai office)

B-404, City Point, Andheri Kurla Road, Andheri East, Mumbai, 400 059, India
Voice: (91-22) 4020-0000
Fax: (91-22) 4020-0011

Mindray Medical Teknoloji Istanbul Ltd. Sti.

KÖYALTı MEVKİİ 29 EKİM CAD.N.1 KUYUMCUKENT 2.NO.PLZ.3.KT. D.1- 9 34520 BAĞÇELİEVLER/YENİBOSNA, İSTANBUL, TÜRKİYE
Voice: (90-212) 482 08 77
Fax: (90-212) 482 08 78

Mindray Medical Teknoloji Istanbul Ltd. Sti. Branch Office Ankara


TURAN GÜNES BULVARI ALEKSANDER DÜBÇEK CAD. NO:18/A ÇANKAYA/ANKARA, TÜRKİYE
Voice: (90-312) 441 96 92
Fax: (90-312) 441 96 93

Mindray Medical Vietnam Co.,Ltd.

Unit 2, 4th Floor, "B" Building, Broadway Office Park, 102 Nguyen Luong Bang Blvd., Tan Phu Ward, Dist. 7, HCMC, Vietnam
Voice: (84) 8 5413-6970
Fax: (84) 8 5413-6971

Mindray Medical Thailand Limited

1768 Thai summit Tower Room 407, 4th floor, New petchaburee Road, Kwaeng Bangkapi, Khet Huai Khwang, Bangkok 10320, Thailand
Voice: (66) 2652-7288
Fax: (66) 2652-7266

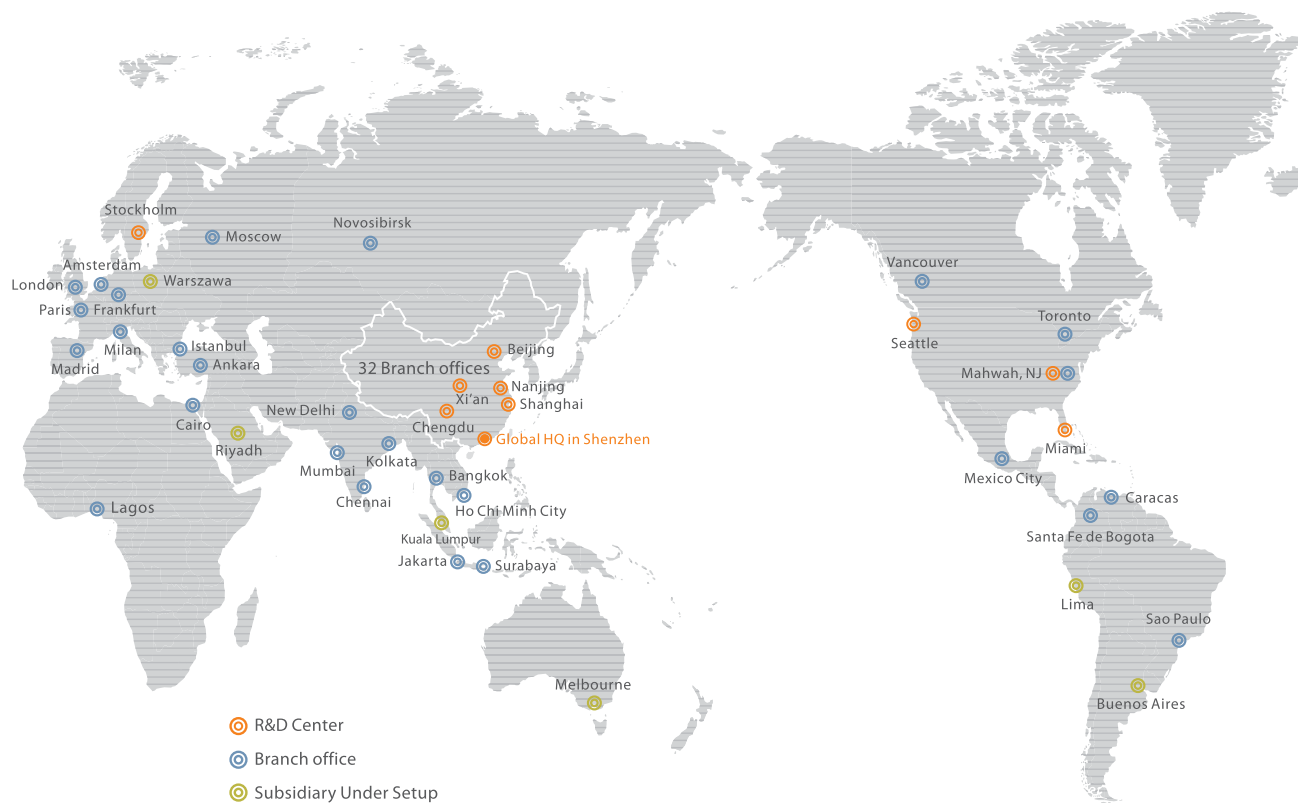

mindray
healthcare within reach

ООО МИНДРЕЙ МЕДИКАЛ РУС
129110, Москва, Олимпийский проспект, 16, стр. 5
Тел.: +7 499 553 60 36 Факс: +7 499 553 60 39
Телефон технической поддержки пользователей
8-800-333-53-23 (звонок по России бесплатный)

www.mindray.com